

# NL

## 1. Indicatie

Diagnostiek van *Enterobius vermicularis* (oxyuren/aarsmaden)


## 2. Benodigdheden

- Transparante plakband
- Draagglasje
- Spatel


## 3. Staalcollectie

Staalname gebeurt best 's avonds enkele uren na het slapengaan, ofwel 's morgens voor toiletbezoek.

1. Breng een strook transparante plakband over een draagglas zodat de plakband langs beide zijden over een rand van het glaasje komt. Een klein stuk plakband wordt dubbel geplooid zodat een niet-klevende zijde wordt bekomen. Houd het glaasje tegen een spatel en maak de tape in de lengte los van het glaasje.

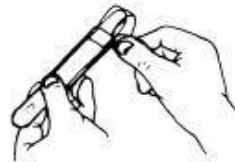

1

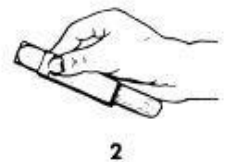

2

2. Haal de plakband over de spatel zodat het klevend oppervlak aan de bovenzijde komt. Druk tape en glaasje tegen de spatel.



3



4

3. Druk het klevend oppervlak tegen verschillende zones van de perianale regio

4. Kleef de tape opnieuw op het glaasje.

Bron: Garcia LS. 2016 Diagnostic Medical Parasitology, 6th ed. ASM Press, Washington, DC.

Let op: de eitjes zijn erg besmettelijk. Draag handschoenen bij afname en breng het glaasje in een afgesloten container (urinepotje).

## 4. Staalbewaring

In afwachting van het transport moet het staal op kamertemperatuur bewaard worden.

### VESTIGINGSEENHEID

#### Afdeling CRI Gent

Industriepark Zwijnaarde 3 - B-9052 Zwijnaarde  
T. +32 9 329 23 00 - Fax +32 9 329 23 01  
labo@cri.be - www.cri.be  
Erkenningsnummer 8-44711-62-998

### MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

#### Cerba HealthCare Belgium BV

Humaniteitslaan 116  
B-1070 Anderlecht  
BE 0419.540.638

# FR

## 1. Indication

Diagnostic d'*Enterobius vermicularis* (oxyures/vers intestinaux)

## 2. Matériel

- Ruban adhésif transparent
- Lame porte-objet
- Spatule

## 3. Prélèvement de l'échantillon


Le prélèvement s'effectue de préférence le soir quelques heures après l'endormissement, ou bien le matin avant d'aller aux toilettes.

1. Placez une bandelette de ruban adhésif transparent sur une lame porte-objet de façon à ce que le ruban dépasse des deux côtés du bord de la lame. Un petit morceau de ruban adhésif est plié en double afin d'obtenir une face non collante. Tenez la lame contre une spatule et décollez le ruban dans le sens de la longueur de la lame.

2. Faites passer le ruban adhésif sur la spatule de façon à ce que la surface collante se retrouve vers le haut. Appuyez le ruban et la lame contre la spatule.

3. Appuyez la surface collante contre différentes zones de la région périanale.

4. Recollez le ruban adhésif sur la lame.

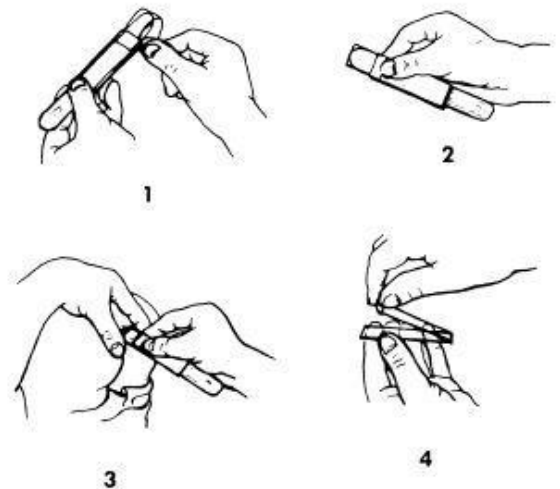

Source: Garcia LS. 2016 Diagnostic Medical Parasitology, 6th ed. ASM Press, Washington, DC.

## 4. Conservation de l'échantillon

En attendant le transport, l'échantillon doit être conservé à température ambiante.

### VESTIGINGSEENHEID

#### **Afdeling CRI Gent**

Industriepark Zwijnaarde 3 - B-9052 Zwijnaarde  
T. +32 9 329 23 00 - Fax +32 9 329 23 01  
labo@cri.be - www.cri.be  
Erkenningsnummer 8-44711-62-998

### MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

#### **Cerba HealthCare Belgium BV**

Humaniteitslaan 116  
B-1070 Anderlecht  
BE 0419.540.638

# EN

## 1. Indication

Diagnosis of *Enterobius vermicularis* (pinworms/threadworms)


## 2. Material

- Transparent adhesive tape
- Glass slide
- Spatula


## 3. Sample collection

The sample should preferably be taken in the evening a few hours after falling asleep, or in the morning before going to the toilet.

1. Place a strip of transparent adhesive tape over a glass slide so that the tape extends over the edge on both sides of the slide. A small piece of adhesive tape is folded double to obtain a non-sticky side. Hold the slide against a spatula and detach the tape lengthwise from the slide.

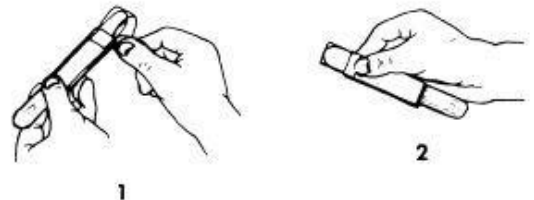

2. Pull the adhesive tape over the spatula so that the sticky surface faces upward. Press the tape and slide against the spatula.

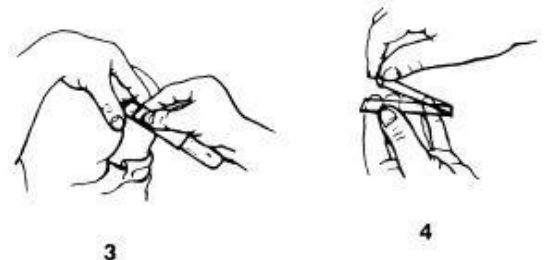

3. Press the sticky surface against various zones of the perianal region.

4. Stick the tape back onto the slide.

Source: Garcia LS. 2016 Diagnostic Medical Parasitology, 6th ed. ASM Press, Washington, DC.

## 4. Sample storage

Pending transport, the sample must be kept at room temperature.

### VESTIGINGSEENHEID

#### Afdeling CRI Gent

Industriepark Zwijnaarde 3 - B-9052 Zwijnaarde  
T. +32 9 329 23 00 - Fax +32 9 329 23 01  
labo@cri.be - www.cri.be  
Erkenningsnummer 8-44711-62-998

### MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

#### Cerba HealthCare Belgium BV

Humaniteitslaan 116  
B-1070 Anderlecht  
BE 0419.540.638